
Veroval®

Oxímetro de pulso




Guía de inicio rápido


Puesta en marcha

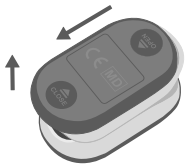

Para abrir el compartimento de las pilas, deslice el símbolo «OPEN» (ABRIR) en el borde de la tapa en la dirección indicada por la flecha.

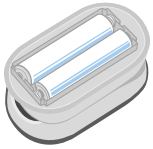

Introduzca las dos pilas en el compartimento para las pilas según la polaridad especificada. Use únicamente 2 pilas de 1,5 V AAA (LR03).

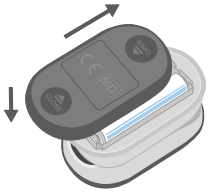

Para cerrar el compartimento de las pilas, ponga de nuevo la tapa en la parte superior y deslícela en la dirección indicada por la flecha en el símbolo «CLOSE» (CERRAR).

Hacer una medición



Presione el borde delantero del dispositivo para abrirlo. Introduzca el dedo con la uña apuntando hacia arriba. Asegúrese de introducir la yema por completo.



Cierre el dispositivo y pulse el botón de encendido para iniciar la medición.
No mueva el dedo durante la medición.

Configuración

Menú de configuración

- Para encender el dispositivo, pulse brevemente el botón de encendido.
- Pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado (aprox. 1 s) para entrar en el menú de configuración.
  Hay dos secciones de configuración (marcadas en amarillo) donde es posible hacer los cambios: **Remind Setup** (Configuración de recordatorios) y **Limit Setup** (Configuración de límites).





Pulsar brevemente	→ Siguiente ajuste
Pulsar y mantener pulsado (aprox. 1 s)	→ Cambiar valor

- Un pequeño asterisco (*) le guía por la configuración. Siempre que aparece un asterisco junto a un ajuste es porque este ajuste está seleccionado y puede modificarse.
- Para cambiar un valor en el ajuste seleccionado, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido.
- Para ir al siguiente ajuste pulse brevemente el botón de encendido.
- Para abandonar el menú de configuración debe desplazarse con el símbolo de asterisco hasta «Exit» (Salir) pulsando brevemente el botón de encendido. Después, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido. Alternativamente, el dispositivo abandona el menú de configuración de manera automática después de un periodo de inactividad (apagado automático después de 10 s).

Remind Setup (Configuración de los recordatorios)



- **Sound Reminder (Recordatorio con sonido):** si está configurado como «on» (activo), el dispositivo emite un pitido tan pronto como se ha alcanzado o superado un límite «Hi», o se ha alcanzado o descendido por debajo de un límite «Lo». El valor que ha disparado el pitido parpadea en la pantalla.
- **Beep (Pitido):** si está configurado como «on» (activo), se emite un pitido con cada latido (pulso).
- **Demo:** si está configurado como «on» (activo), se escucha un pitido regular cuando usted se encuentra en el menú de configuración. Su función es imitar un pulso y (sin realizar ninguna medición) mostrar cómo es el sonido del pitido. Esto le permite, por ejemplo, hacerse una idea del volumen del dispositivo. Por lo general, el usuario desactiva manualmente este ajuste después de una breve prueba. En caso de que estén activados ambos sonidos (Recordatorio con sonido y Pitido), usted los oirá al mismo tiempo.
- **Restore (Restaurar):** pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado (aprox. 1 s) para restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica. Una vez restaurado aparece la palabra «OK» y permanece hasta el siguiente cambio de configuración. Esto puede hacerse tantas veces como se desee.

  Configuración predeterminada después de la restauración:

SpO_2 Hi	100
SpO_2 Lo	94
PR Hi	130
PR Lo	50

- **Brightness (Brillo):** puede ajustar el brillo de la pantalla, el nivel 1 es el más oscuro y el 5 el más claro.

Limit Setup (Configuración de los límites)



En el Oxímetro de pulso Veroval® es posible configurar los **límites de la alarma** de **manera individual**.

- Ejemplos de señales sonoras:

  SpO_2 Hi: 98 → emite un pitido **al alcanzar o superar el** 98 %

  SpO_2 Lo: 94 → emite un pitido **al alcanzar o descender por debajo del** 94 %

  PR Hi: 130 → emite un pitido **a** 130 bpm **y por encima**

  PR Lo: 50 → emite un pitido **a** 50 bpm **y por debajo**

- **+/- :** puede seleccionar + o - para elegir si al pulsar el botón de encendido se aumentan (+) o reducen (-) los valores. Para PR esto tiene lugar en pasos de 5.

Valores de referencia de SpO_2

Intervalo de medición de SpO_2	Clasificación / Recomendación
95 % – 100 %	**Nivel de oxígeno normal:** Indica niveles suficientes de oxígeno en sangre.
90 % – 94 %	**Nivel de oxígeno bajo:** Esté pendiente de sus síntomas. Se recomienda una cita con un profesional sanitario.
<90 %	**Nivel de oxígeno crítico:** Se recomienda encarecidamente una cita con un profesional sanitario.