
Veroval®

Oxymètre de pouls




Guide de démarrage rapide


Mise en service

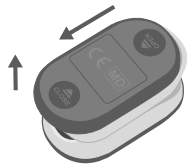

Pour ouvrir le compartiment des piles, faites glisser le symbole « OPEN » (OUVRIR) situé sur le bord du couvercle dans le sens indiqué par la flèche.

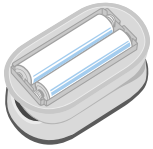

Insérez les deux piles en respectant la polarité indiquée.
Utilisez uniquement des piles de type AAA (LR03) 2 x 1,5 V.

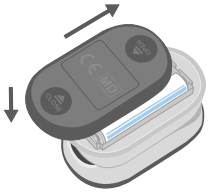

Pour fermer le compartiment des piles, replacez le couvercle et faites-le glisser dans le sens indiqué par la flèche sur le symbole « CLOSE » (FERMER).

Prise de mesure



Appuyez sur le bord avant de l'appareil pour l'ouvrir. Introduisez votre doigt, l'ongle tourné vers le haut. Assurez-vous que le bout de votre doigt est complètement inséré.



Fermez l'appareil et appuyez sur le bouton ON pour lancer la mesure.
Gardez votre doigt immobile pendant la mesure.

Mode de réglage

Menu réglages

- Appuyez brièvement sur le bouton ON pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé (environ 1 seconde) pour accéder au menu réglages. Il existe deux sections de configuration (indiquées en jaune) dans lesquelles des modifications peuvent être apportées :
  Remind Setup (configuration des rappels) et **Limit Setup** (configuration des limites).





Appuyer brièvement → Paramètre suivant

Appuyer et maintenir enfoncé (environ 1 seconde) → Modifier la valeur

- Un petit symbole en forme d'astérisque (*) vous guide à travers le mode de réglage. Lorsque l'astérisque apparaît à côté d'un paramètre, celui-ci est sélectionné et peut être modifié.
- Pour modifier une valeur dans le paramètre sélectionné, appuyez sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé.
- Pour passer au paramètre suivant, appuyez brièvement sur le bouton ON.
- Pour quitter le menu réglages, vous devez faire défiler le symbole en forme d'astérisque jusqu'à « Exit » en appuyant brièvement sur le bouton ON. Appuyez ensuite sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé. Sinon, l'appareil quitte automatiquement le menu réglages après une période d'inactivité (mise hors tension automatique après 10 secondes).

Remind Setup (configuration des rappels)



- **Sound Reminder (rappel sonore) :** si ce paramètre est réglé sur « on », un bip retentit dès qu'une limite supérieure « Hi » est atteinte ou dépassée, ou dès qu'une limite inférieure « Lo » est atteinte ou non respectée. La valeur qui a déclenché le bip clignote à l'écran.
- **Beep (bip) :** si ce paramètre est réglé sur « on », un bip retentit à chaque battement cardiaque (pouls).
- **Demo :** si ce paramètre est réglé sur « on », un bip régulier retentit lorsque vous êtes dans le menu réglages. Ce paramètre est destiné à simuler un pouls, et (sans effectuer de mesure) à vous donner une idée du son du bip. Cela vous donne une idée du volume de l'appareil, par exemple. Ce paramètre est généralement réinitialisé manuellement sur « off » par l'utilisateur après un bref test. Si les deux sons (rappel sonore et bip) sont réglés sur « on », vous pouvez les entendre simultanément.
- **Restore (réinitialisation) :** maintenez le bouton ON enfoncé (environ 1 seconde) pour réinitialiser l'appareil à ses paramètres par défaut. Une fois cette opération effectuée, le mot « OK » s'affiche et reste visible jusqu'à la prochaine modification du mode de réglage. Cette opération peut être effectuée aussi souvent que nécessaire.
  Le mode de réglage par défaut après la réinitialisation :

SpO_2 Hi	100
SpO_2 Lo	94
PR Hi	130
PR Lo	50

- **Brightness (luminosité) :** vous pouvez régler la luminosité de l'écran, 1 correspondant à la luminosité la plus faible et 5 à la plus élevée.

Limit Setup (configuration des limites)



Les **limites d'alarme** peuvent être réglées **individuellement** sur l'oxymètre de pouls Veroval®.

- Exemples de signaux sonores :

SpO_2 Hi :	98	→ émet un bip lorsque la saturation pulsée en oxygène **est supérieure ou égale à** 98 %
SpO_2 Lo :	94	→ émet un bip lorsque la saturation pulsée en oxygène **est inférieure ou égale à** 94 %
PR Hi :	130	→ émet un bip lorsque le pouls **est supérieur ou égal à** 130 bpm
PR Lo :	50	→ émet un bip lorsque le pouls **est inférieur ou égal à** 50 bpm

- **+/- :** vous pouvez sélectionner + ou - pour choisir si l'appui sur le bouton ON augmente (+) ou diminue (-) les valeurs. Pour le pouls, la valeur est modifiée par paliers de 5.

Valeurs de référence pour la SpO_2

Plage de mesure de la SpO_2	Classification / Recommandation
95 % – 100 %	**Saturation en oxygène normale :** indique une saturation en oxygène suffisante du sang.
90 % – 94 %	**Faible saturation en oxygène :** surveillez vos symptômes. Une consultation médicale est recommandée.
< 90 %	**Saturation en oxygène critique :** une consultation médicale est vivement recommandée.