
Veroval®

Saturimetro




Guida rapida


Messa in funzione

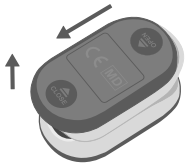

Per aprire il vano batteria, far scorrere il simbolo "OPEN" (APERTO) posto sul bordo del coperchio nella direzione indicata dalla freccia.

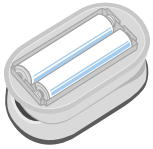

Inserire entrambe le batterie rispettando la polarità specificata.
Utilizzare esclusivamente batterie di tipo: 2 x 1,5 V AAA (LR03).

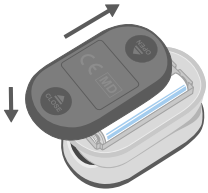

Per chiudere il vano batteria, riposizionare il coperchio e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia sul simbolo "CLOSE" (CHIUSO).

Esecuzione di una misurazione



Premere il bordo anteriore del dispositivo per aprirlo. Inserire il dito con l'unghia rivolta verso l'alto. Assicurarsi che il polpastrello sia inserito completamente.



Chiudere il dispositivo e premere il tasto ON per avviare la misurazione.
Tenere il dito fermo durante la misurazione.

Impostazioni

Menu impostazioni

- Premere brevemente il tasto ON per accendere il dispositivo.
- Tenere premuto (per circa 1 sec.) il tasto ON per accedere al menu impostazioni.
  Sono presenti due sezioni (in giallo) in cui è possibile eseguire le modifiche seguenti:
  Remind Setup (Configurazione promemoria) e **Limit Setup** (Configurazione limiti).





Premere brevemente → Impostazione successiva
Tenere premuto per circa 1 sec. → Modificare il valore

- Un'icona con asterisco (*) guida tra le impostazioni. Quando l'asterisco compare accanto ad un'impostazione, questa viene selezionata e può essere modificata.
- Per modificare un valore dell'impostazione selezionata, tenere premuto il tasto ON.
- Premere brevemente il tasto ON per passare all'impostazione successiva.
- Per uscire dal menu delle impostazioni, scendere con l'icona dell'asterisco fino a "Exit" (Esci) premendo brevemente il tasto ON. Quindi tenere premuto il tasto ON. In alternativa, il dispositivo esce automaticamente dal menu delle impostazioni dopo un tempo di inattività (spegnimento automatico dopo 10 sec.).

Remind Setup (Configurazione promemoria)



- **Sound Reminder** (Promemoria acustico): se impostato su "on", il dispositivo emette un bip non appena raggiunge o supera un limite superiore ("Hi"), oppure raggiunge o scende al di sotto di un limite inferiore ("Lo"). Il valore che fa scattare il bip lampeggia sul display.
- **Beep** (Bip)**:** se impostato su "on", viene emesso un bip ad ogni battito cardiaco (polso).
- **Demo:** se impostato su "on", viene emesso un bip regolare quando ci si trova nel menu delle impostazioni. Il suono simula il polso ed ha scopo dimostrativo (senza che si effettui una misurazione). Ad esempio, consente di farsi un'idea del volume del dispositivo. In genere questa impostazione viene riportata manualmente su "off" dall'utilizzatore dopo una breve prova. Se entrambi i suoni (Promemoria acustico e Bip) sono impostati su "on", si odono contemporaneamente.
- **Restore** (Reset)**:** tenere premuto (per circa 1 sec.) il tasto ON per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Eseguita l'operazione, comparirà la scritta "OK" e rimarrà fino alla successiva modifica delle impostazioni, che potrà avvenire ogni qualvolta necessario.
  Impostazioni predefinite dopo il reset:

SpO_2 Hi	100
SpO_2 Lo	94
PR Hi	130
PR Lo	50

- **Brightness** (Luminosità)**:** è possibile regolare la luminosità del display, tenendo presente che 1 è la luminosità minima e 5 la massima.

Limit Setup (Configurazione limiti)



I limiti di allarme possono essere impostati **singolarmente** sul saturimetro Veroval®.

- Esempi di segnali bip:

SpO_2 Hi:	98	→ bip **a** 98% **e oltre**
SpO_2 Lo:	94	→ bip **a** 94% **e al di sotto**
PR Hi:	130	→ bip **a** 130 bpm **e oltre**
PR Lo:	50	→ bip **a** 50 bpm **e al di sotto**

- **+/- :** si può selezionare + oppure - per scegliere se, premendo il tasto ON, i valori aumentano (+) o diminuiscono (-). Per il PR, ciò avviene a passi di 5.

Valori di riferimento per SpO_2

Intervallo di misurazione della SpO_2	Classificazione/raccomandazione
95% – 100%	**Livello di ossigeno normale:** indica un livello sufficiente di ossigeno nel sangue.
90% – 94%	**Livello di ossigeno basso:** tenere sotto controllo i sintomi. Si raccomanda di consultare un medico.
< 90%	**Livello di ossigeno critico:** si raccomanda vivamente di consultare un medico.