
Veroval®

Pulsoxime ter




Snelstartgids


Inbedrijfstelling

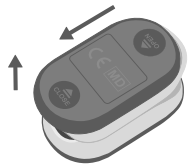

Om het batterijvakje te openen, schuift u het symbool “OPEN” aan de rand van het deksel in de richting van de pijl.

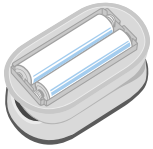

Plaats beide batterijen overeenkomstig de gespecificeerde polariteit. Gebruik uitsluitend batterijen van het type: 2 x 1,5 V AAA (LR03).

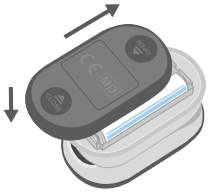

Om het batterijvakje te sluiten, plaatst u het deksel er opnieuw op en schuift u het in de richting van de pijl op het symbool “CLOSE”.

Uitvoeren van een meting



Druk op de voorste rand van het apparaat om het te openen. Steek uw vinger erin, met uw nagel naar boven gericht. Zorg dat uw vingertop volledig is ingebracht.



Sluit het apparaat en druk op de AAN-knop om de meting te starten.
Houd uw vinger stil tijdens de meting.

Instellingen

Menu voor instellingen

- Druk kort op de AAN-knop om het apparaat in te schakelen.
- Houd de AAN-knop ingedrukt (ongeveer 1 seconde) om het menu voor instellingen te openen. Er zijn twee onderdelen voor instellingen (in het geel weergegeven), waarin wijzigingen kunnen worden aangebracht:
  Remind Setup (instellingen voor herinneringen) en **Limit Setup** (instellingen voor limieten).





Druk kort op → volgende instelling
Ingedrukt houden (ca. 1 sec.) → waarde wijzigen

- Een klein asteriskpictogram (*) leidt u door de instellingen. Wanneer er een asterisk naast een instelling wordt weergegeven, is deze instelling geselecteerd en kan deze worden gewijzigd.
- Om een waarde in de geselecteerde instelling te wijzigen, houdt u de AAN-knop ingedrukt.
- Om naar de volgende instelling te gaan, drukt u kort op de AAN-knop.
- Om het menu voor instellingen af te sluiten, verplaatst u de asterisk helemaal naar beneden naar “Exit” (Afsluiten) door kort op de AAN-knop te drukken. Houd vervolgens de AAN-knop ingedrukt. Alternatief sluit het apparaat het menu voor instellingen automatisch af na een periode van inactiviteit (automatische uitschakeling na 10 seconden).

Remind Setup (Instellingen voor herinneringen)



- **Sound Reminder (Geluidssignalen voor herinneringen):** indien deze optie is ingesteld op “on”, wordt er een pieptoon weergegeven wanneer een “Hi”-grenswaarde wordt bereikt of overschreden, of een “Lo”-grenswaarde wordt bereikt of onderschreden. De waarde die de pieptoon heeft geactiveerd, wordt knipperend op de display weergegeven.
- **Beep (Pieptoon):** indien deze optie is ingesteld op “on”, wordt bij elke hartslag (polsslag) een pieptoon weergegeven.
- **Demo:** indien deze optie is ingesteld op “on”, wordt er een regelmatige pieptoon weergegeven terwijl u zich in het menu voor instellingen bevindt. Deze is bedoeld om een polsslag te simuleren en (zonder een meting uit te voeren) te laten horen hoe de pieptoon klinkt. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld een idee van het volumeniveau van het apparaat krijgen. Deze instelling wordt door de gebruiker na een korte test meestal handmatig weer op “off” ingesteld. Indien beide geluiden (geluidssignaal voor herinnering en pieptoon) op “on” zijn ingesteld, worden deze tegelijkertijd weergegeven.
- **Restore (Herstellen):** Houd de AAN-knop ingedrukt (ongeveer 1 seconde) om het apparaat te herstellen naar de fabrieksinstellingen. Wanneer dit is gebeurd, wordt het woord “OK” weergegeven en blijft dit het geval tot de instellingen opnieuw worden gewijzigd. Dit kan zo vaak worden gedaan als noodzakelijk is.

  Standaardinstellingen na het herstellen:

SpO_2 Hi	100
SpO_2 Lo	94
PR Hi	130
PR Lo	50

- **Brightness (Helderheid):** u kunt de helderheid van de display aanpassen, waarbij 1 het donkerst is en 5 het helderst.

Limit Setup (Instellingen voor limieten)



De **alarmlimieten** kunnen **individueel** op de Veroval®-pulsoximeter worden ingesteld.

- Voorbeelden van pieptonen:

SpO_2 Hi:	98	→ geeft een piepsignaal **bij** 98 % **en hoger**
SpO_2 Lo:	94	→ geeft een piepsignaal **bij** 94% **en lager**
PR Hi:	130	→ geeft een piepsignaal **bij** 130 bpm **en hoger**
PR Lo:	50	→ geeft een piepsignaal **bij** 50 bpm **en lager**

- **+/- :** u kunt + of - selecteren om te bepalen of de waarden bij het indrukken van de AAN-knop worden verhoogd (+) of verlaagd (-). Voor PR gebeurt dit in stappen van 5.

Referentiewaarden voor SpO_2

Meetbereik SpO_2	Classificatie/aanbeveling
95 % – 100 %	**Normaal zuurstofgehalte:** duidt op voldoende zuurstofgehalte in het bloed.
90 % – 94 %	**Laag zuurstofgehalte**: houd uw symptomen in de gaten. Overleg met een arts wordt aanbevolen.
< 90 %	**Kritisch zuurstofgehalte:** overleg met een arts wordt sterk aanbevolen.