
Veroval®

Oxímetro digital




Guia rápido

Colocação em funcionamento

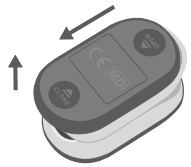

Para abrir o compartimento das pilhas, faça deslizar o símbolo “OPEN” (ABRIR) na extremidade da tampa no sentido indicado pela seta.

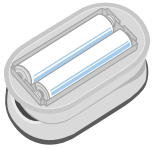

Insira ambas as pilhas de acordo com a polaridade especificada. Utilize apenas pilhas do tipo: 2 pilhas AAA de 1,5 V (LR03).



Para fechar o compartimento das pilhas, volte a colocar a tampa por cima e faça-a deslizar no sentido indicado pela seta no símbolo “CLOSE” (FECHAR).

Fazer uma medição



Prima a extremidade frontal do dispositivo para o abrir. Insira o dedo com a unha virada para cima. Certifique-se de que a ponta do dedo está totalmente inserida.



Feche o dispositivo e prima o botão LIGAR para iniciar a medição. Mantenha o dedo imóvel durante a medição.

Configurações

Menu de configurações

- Prima brevemente o botão LIGAR para ligar o dispositivo.
- Prima sem soltar o botão LIGAR (aprox. 1 s) para aceder ao menu de configurações.
  Existem duas secções de configuração (escritas a amarelo) onde podem ser feitas alterações:
  Remind Setup (Configuração do lembrete) e **Limit Setup** (Configuração do limite).





Premir brevemente → Definição seguinte
Premir sem soltar (aprox. 1 s) → Alterar valor

- Um pequeno símbolo de asterisco (*) orienta-o nas definições. Sempre que o asterisco aparecer junto a uma definição, essa definição está selecionada e pode ser alterada.
- Para alterar um valor na definição selecionada, prima sem soltar o botão LIGAR.
- Para passar para a definição seguinte, prima brevemente o botão LIGAR.
- Para sair do menu de configurações, tem de navegar com o símbolo de asterisco até “Exit” (Sair), premindo brevemente o botão LIGAR. Em seguida, prima sem soltar o botão LIGAR. Em alternativa, o dispositivo sai automaticamente do menu de configurações passado um período de inatividade (desligamento automático após 10 s).

Remind Setup (Configuração do lembrete)



- **Sound Reminder (Lembrete sonoro):** se estiver definido para “on” (ligar), é emitido um sinal sonoro assim que um limite “Hi” (superior) for atingido ou excedido, ou assim que um limite “Lo” (inferior) for atingido ou não alcançado. O valor que desencadeou o sinal sonoro fica intermitente no visor.
- **Beep (Bipe):** se estiver definido para “on” (ligar), é emitido um bipe a cada batimento cardíaco (pulso).
- **Demo (Demonstração):** se estiver definido para “on” (ligar), é emitido um bipe regular enquanto estiver no menu de configurações. Destina-se a simular um pulso e a demonstrar (sem efetuar uma medição) o som do bipe. Isto permite-lhe, por exemplo, ter uma noção do volume do dispositivo. Normalmente, esta definição é reposta manualmente para “off” (desligar) pelo utilizador após um breve teste. Caso ambos os sons (Lembrete sonoro e Bipe) estejam definidos para “on” (ligar), pode ouvi-los ao mesmo tempo.
- **Restore (Restaurar):** prima sem soltar o botão LIGAR (aprox. 1 s) para repor as definições de fábrica do dispositivo. Depois de concluído, a palavra “OK” aparece e permanece até à alteração seguinte das definições. Isto pode ser feito sempre que necessário.

  Predefinições depois da restauração:

SpO_2 Hi	100
SpO_2 Lo	94
PR Hi	130
PR Lo	50

- **Brightness (Luminosidade):** pode ajustar a luminosidade do visor, sendo 1 o nível mais escuro e 5 o mais claro

Limit Setup (Configuração do limite)



Os **limites de alarme** podem ser definidos **individualmente** no oxímetro digital Veroval®.

- Exemplos de bipe:

SpO_2 Hi:	98	→ emite bipes **a** 98 % **e acima**
SpO_2 Lo:	94	→ emite bipes **a** 94 % **e abaixo**
PR Hi:	130	→ emite bipes **a** 130 bpm **e acima**
PR Lo:	50	→ emite bipes **a** 50 bpm **e abaixo**

- **+/- :** pode selecionar + ou - para escolher se premir o botão LIGAR aumenta (+) ou diminui (-) os valores. No caso de PR, isto é feito em incrementos de 5.

Valores de referência para SpO_2

Intervalo de medição de SpO_2	Classificação/Recomendação
95 % – 100 %	**Nível de oxigénio normal:** indica níveis de oxigénio suficientes no sangue.
90 % – 94 %	**Nível de oxigénio baixo:** monitorize os seus sintomas. Recomenda-se consultar um médico.
< 90 %	**Nível de oxigénio crítico:** recomenda-se vivamente consultar um médico.