


Omnisilk®

Kirurgisk tejp av konstsilke

Omnisilk är en tejp av konstsilke som fungerar som förbandsfixering och även för fixering av sonder, kanyler och katetrar.

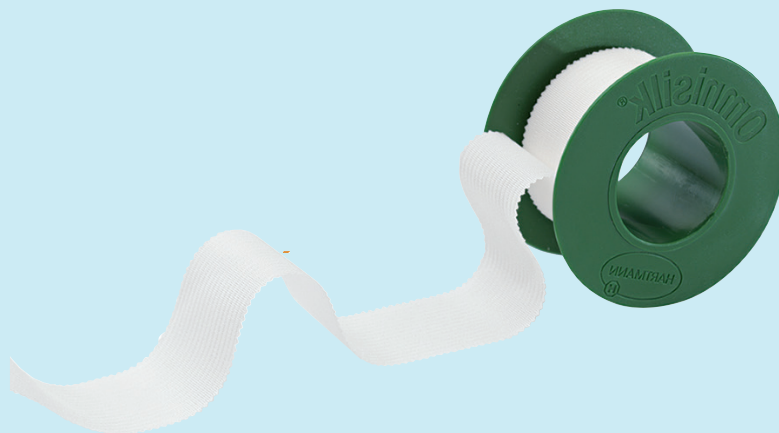

- 1 Säker fixering
- 2 Fixeringstejp för känslig hud
- 3 Lämnar inga klisterrester
- 4 Enkel hantering
- 5 Behöver inte avlägsnas vid röntgen
- 6 Fri från kolofonium och latex

Fördelar:

Säker fixering
 Passar känslig hud
 Lämnar inga klisterrester
 Enkel hantering
 Behöver inte avlägsnas vid röntgen
 Fri från kolofonium och latex



Egenskaper

Omnisilk är genomsläpplig för luft och fukt. Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden. Omnisilk är lätt att riva eftersom den har tandade kanter. Omnisilk absorberar inte röntgenstrålar och behöver inte avlägsnas före röntgenundersökningar.

Material

100% acetatväv. Hypoallergen häftmassa baserad på syntetisk gummi. Fri från kolofonium och latex. Spole av polystyren. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Indikation

Alla sorters förbandsfixering. För fixering av t.ex. kanyler, sonder och katetrar. Passar för patienter med känslig hud.

Fixeringsinstruktion

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnisilk®	2,5 cm x 9,2 m	900 419	1 x 20 st	12 Afp
Styckförpackad i ask	5 cm x 9,2 m	900 420	1 x 10 st	12 Afp